



DHEA			in pg/mL		
Lab Code	Method	Producer	Sample 1	Sample 2	Sample 3
3013	ELISA	IBL	409,7	65,9	216,8
3036	ELISA	DRG	2391,9	1412,1	1757,9
3047	GC/LC-MS	Others	447,8	68,3	257,1
3048	ELISA	IBL	475,5	92,2	302,6
3050	ELISA	IBL	551,7	132,2	351,3
3061	ELISA	IBL	473,3	114,6	332,2
3065	ELISA	IBL	472,5	102,6	297,3
13004	ELISA	IBL	496,0	106,2	357,4
13010	ELISA	Salimetrics	536,4	61,9	314,8
15033	GC/LC-MS	Others	293,2	24,9	242,2
20003	ELISA	Others	616,8	121,0	370,6
30001	LUM	IBL	605,2	115,3	288,2
40001	ELISA	IBL	555,0	123,0	337,0
40002	ELISA	IBL	544,4	125,6	346,4
40003	GC/LC-MS	Others	414,0	77,5	253,8
40015	ELISA	Demeditec	980,9	233,4	571,1
40016	ELISA	Demeditec	770,5	131,4	416,4
40022	GC/LC-MS	Others	384,4	69,6	247,3
40024	ELISA	IBL	560,0	124,0	301,0
40026	ELISA	Demeditec	767,7	116,2	446,4
40027	ELISA	IBL	521,2	121,0	334,3
40036	ELISA	IBL	401,6	96,3	316,5
40049	ELISA	IBL	524,1	107,0	325,9
40055	ELISA	IBL	577,0	117,0	362,0

Sample 1						
Method		LUM	ELISA	ELISA	ELISA	GC/LC-MS
Supplier	all	IBL	IBL	Demeditec	DRG	Others
Mean	615,5	605,2	504,8	839,7	2391,9	384,9
SD	396,1		56,2	122,3		66,4
Mean - 2SD	0,0		392,4	595,1		252,1
Mean + 2SD	1407,7		617,1	1084,3		517,6
Min.	293,2	605,2	401,6	767,7	2391,9	293,2
Max.	2391,9	605,2	577,0	980,9	2391,9	447,8
Amount	24	1	13	3	1	4

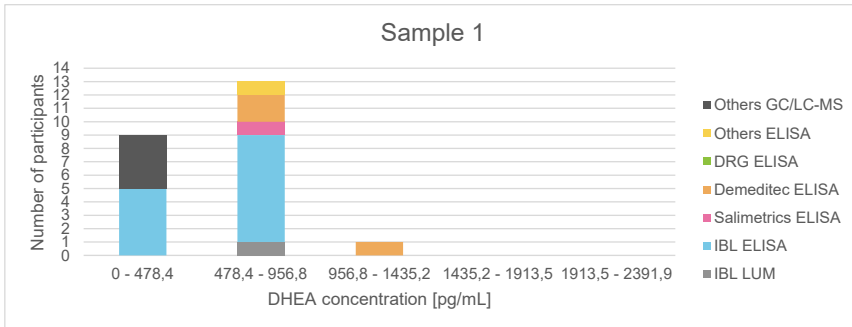

Sample 2						
Method		LUM	ELISA	ELISA	ELISA	GC/LC-MS
Supplier	all	IBL	IBL	Demeditec	DRG	Others
Mean	160,8	115,3	109,8	160,3	1412,1	60,1
SD	263,6		17,8	63,7		23,8
Mean - 2SD	0,0		74,1	32,9		12,5
Mean + 2SD	687,9		145,5	287,8		107,7
Min.	24,9	115,3	65,9	116,2	1412,1	24,9
Max.	1412,1	115,3	132,2	233,4	1412,1	77,5
Amount	24	1	13	3	1	4

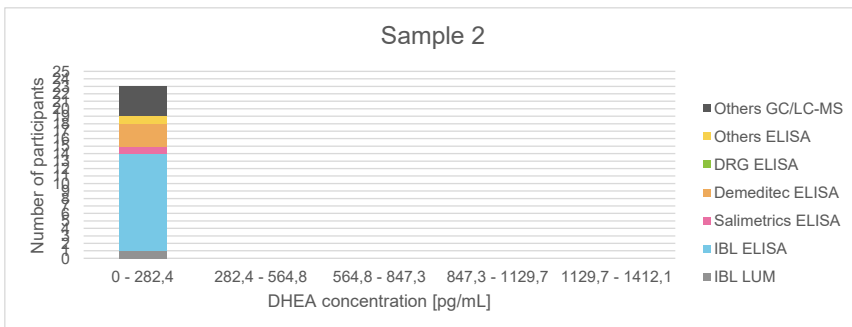

Sample 3						
Method		LUM	ELISA	ELISA	ELISA	GC/LC-MS
Supplier	all	IBL	IBL	Demeditec	DRG	Others
Mean	389,4	288,2	321,6	478,0	1757,9	250,1
SD	294,5		38,0	82,0		6,6
Mean - 2SD	0,0		245,6	313,9		236,8
Mean + 2SD	978,3		397,6	642,0		263,4
Min.	216,8	288,2	216,8	416,4	1757,9	242,2
Max.	1757,9	288,2	362,0	571,1	1757,9	257,1
Amount	24	1	13	3	1	4

